


# 退室後の清掃

## 1. 床

- オートモップで床を拭く。

## 2. 生体監視モニター

- 電源を消し、電源コードを抜く
- 環境クロスにてモニター全体とコード類を1本ずつ拭く。
- 各コード類は使いやすいように整理しておく。
- 圧ラインの固定板・加圧バッグ・加圧装置は環境クロスで拭き、所定位置に戻す。

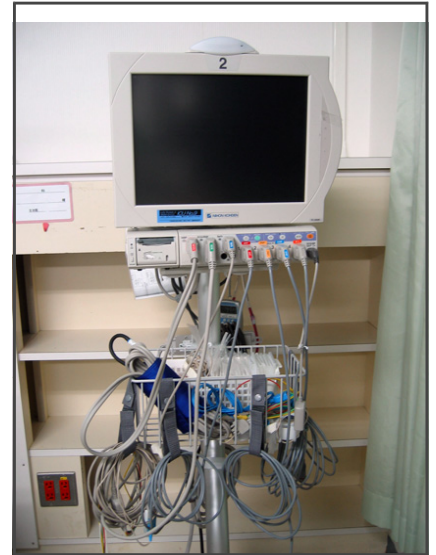

## 3. 呼吸器

- 人工呼吸器のパイピング・電源をはずし、環境クロスで拭き、前室に置く。
- ペーシェントシステムはつけたままにし、それ以外の呼吸器回路は茶色の医療廃棄物のボックスに捨てる。
- CEに回路組み立てと点検の依頼を電話連絡する。☎ CE PHS(日勤・当直用)

## 4. 酸素・吸引物品

- STER-O2は中央配管からはずし、銀のケースに入れておく。
- 使用していない中央配管は全て栓をしておく。
- 口腔および鼻腔吸引用の水・容器を破棄する。



## 5. ヘッドカウンター・床頭台

- カウンター・床頭台に忘れ物がないかチェックする。
- トレイのルート整理用のチューブ鉗子が5本あるか確認する。
- トレイを回収し、環境クロスで拭く。
- カウンター・ナースコール・床頭台を環境クロスで拭く。
- ナースコールは丸めてカウンターに置いておく。切断の原因となるため、コードを結ばないようにする。



## 6. オーバーテーブル

- トレイを回収し、トレイと白カップを環境クロスで拭く。
- 体温計は汚物室(洗浄室)にあるカネトール消毒液につけて消毒し、乾燥後に所定位置に戻す。
- クリップボード・各種ファイルを環境クロスで拭く。

## 7. ベッド

- ベッドは使用シーツを除去後、環境クロスで拭き、新しいシーツをかけベッドメイキングする。
- 体位交換用のクッションは洗濯へ。
- 電気毛布は包布をはがし、新しい包布かけて所定位置に戻す。
- コードは環境クロスで拭いた後、束ねた状態で本体に接続し、本体と包布の間に入れておく。
- シーツ・包布・枕カバー・包布をはがした掛け布団・カバーをはがした枕は緑のランドリーボックスに入れる。
- バスタオル・タオルはグレーのボックスに入れる。
- 血液汚染や便汚染をしたものはビニール袋に入れ、何がどれだけ入っているように明記する。  
(例：バスタオル1枚 血液汚染)

## 8. 輸液ポンプ、シリンジポンプ

- 使用した輸液ポンプ・シリンジポンプは環境クロスで拭き、充電しておく。
- コード類は拭いた後、まるめてナイロンひもで結び、所定位置に戻す。
- 使用した支柱台とシリンジポンプ台は環境クロスで拭き、所定位置に戻す。
- コード類・テーブルタップは環境クロスで拭き、コードをまるめてナイロンひもで結び、所定位置に戻す。

## 9. ゴミ箱

- 可燃ごみ用のゴミ箱からゴミ箱ごと、ゴミ収集ボックスに入れる。新しいゴミ袋をセットする。
- 医療廃棄ボックスもいっぱいになっていけば、箱ごと新しいものと交換する。

## 10. テレビ

- テレビカードが残っていないか確認する。
- 環境クロスで拭き、コードは束ねて引き出しの中に入れる。
- 倉庫の所定位置に戻す。